



BSB 4050

HU / Babamérleg 2 az 1-ben ■ Használati útmutató



Tartalom

BEVEZETŐ	4
A TERMÉK BEMUTATÁSA	4
FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ	5
A CSOMAGOLÁS TARTALMA	7
A MÉRLEG RÉSZEI	7
AZ ELEMÉK BEHELYEZÉSE	8
Elem lemerülés kijelzése	8
AZ ALÁTÉT ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS RÖGZÍTÉSE	8
SÚLYMÉRÉS	9
A mérleg bekapcsolása	9
Mértékegység megváltoztatása	9
Súlymérés alátéttel	9
Súlymérés alátét nélkül	9
Súlymérés tára funkcióval	10
Súlymérés „hold” funkcióval	10
A mérleg kikapcsolása	10
HIBAÜZENETEK	10
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	10
TÁROLÁS	11
MŰSZAKI ADATOK	11
A LEMERÜLT ELEMÉK MEGSEMISÍTÉSE	11
A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ	11
A KÉSZÜLÉKEN, A CSOMAGOLÁSON ÉS A TARTOZÉKOKON HASZNÁLT JELEK MAGYARÁZATA	12

Bevezető

- Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a BSM 4050 Bayby digitális mérleget.
- Az első használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót, és ismerkedjen meg a mérleg részeivel és működtető elemeivel. Az útmutatót későbbi felhasználásokhoz őrizze meg.

A termék bemutatása

- A digitális mérleggel csecsemőket, kisebb és nagyobb gyerekeket lehet mérni fekvő és állva.
- A csecsemők testsúlyának a méréséhez (10 kg-ig) a készülékhez egy összeállítható, fel- és leszerelhető alátétet is mellékelünk. Az alátét használata nélkül nagyobb gyerekeket (1 és 10 év között) is lehet mérni, egészen 40 kg-os súlyig.
- A csecsemőket (vagy nagyobb gyerekeket) ruhában vagy törülközőbe csavarva stb. is lehet mérni a TARE (tára) funkció segítségével (a ruha vagy törülköző stb. súlyát kell először megmérni). Amennyiben a gyereke túlságosan eleven, akkor értékelni fogja a HOLD - mért érték megőrzése (blokkolása) funkciót. Ennek a segítségével akkor is meg lehet mérni a gyerek súlyát, ha az folyamatosan mozog.
- A készülékkel több mértékegység is beállítható: kg, oz vagy lb.

Fontos figyelmeztetések a biztonságos használathoz



Figyelmeztetés!


A gyermekmérleg megfelel a vonatkozó szabványoknak, a készülék használata biztonságos (amennyiben a használati útmutató szerint üzemeltetik). A készülék használata közben a gyermek épsége és biztonsága legyen a legfontosabb szempont.

- Ezt a mérleget kizárólag csak háztartási célokra lehet felhasználni. A készüléket kereskedelmi célokra használni nem lehet.
- A gyermekmérleg és tartozékainak a kicsomagolása után a zacskókat tárolja gyerekektől elzárt helyen. A zacskók a felügyelet nélkül hagyott gyerekek esetében fulladásos balesetet okozhatnak!
- A gyermekmérleget kizárólag csak felnőtt személy kezelheti. A mérleg nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A mérleget és az alátétet gyerekektől elzárt helyen tárolja.
- A mérleghez csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.
- A mérleget fürdőszobában, poros helyiségben vagy nedves környezetben ne használja. A készüléket ne tegye ki jelentős hőmérséklet ingadozásoknak és elektromágneses mező hatásainak. A mérleget óvja a kozmetikai készítményektől és tisztító szerektől.
- A mérleget csak sima és vízszintes helyre helyezze le (ahol az nem tud lecsúszni vagy felborulni. A mérleget ne tegye forró tárgyak közelébe (kályha, hőszugárzó, kandalló stb.), illetve ne használja nedves és vizes helyen (fürdőszobában, medence mellett, szaunában stb.). Amennyiben a mérleget nem stabil vagy puha felületre helyezi le, akkor a mérés nem lesz pontos illetve biztonságos.
- A mérleget vízbe mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos.
- Ha a mérleget hosszabb ideig nem fogja használni, akkor abból az elemeket vegye ki. Az elemeket gyerekektől elzárt helyen tárolja, mert ezek gyerekek kezében veszélyesek lehetnek. Ha a gyerek véletlenül elemet nyelt le, akkor azonnal forduljon orvoshoz.


- Az elemeket nem szétszedni, felmelegíteni vagy tűzbe dobni. Az elemeket óvja közvetlen napsütéstől, sugárzó hőtől stb.
- A készüléket, az elektromos és mechanikus tulajdonságokat megváltoztató módon átalakítani tilos.
- Amennyiben a mérleg sérült, akkor azt használni tilos!
- A mérleget ne próbálja megjavítani saját erőből. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.
- Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő végéig őrizze meg az eredeti kartondobozt és a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és a termékhiba felelősségre vonatkozó eladói nyilatkozatot vagy a garancialevelet. A mérleget legbiztonságosabban a saját eredeti csomagolásában lehet tárolni és szállítani.

A csomagolás tartalma

- A gyermekmérleget vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál.

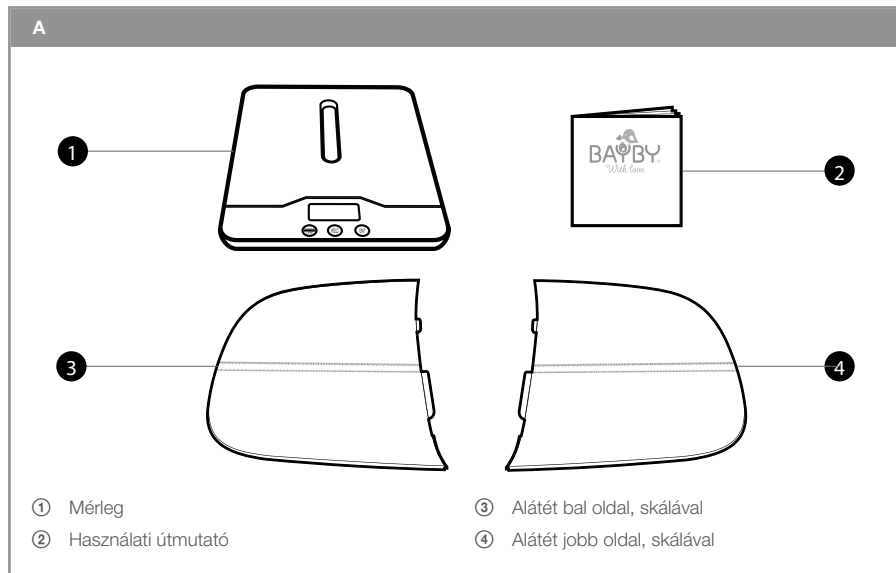


A mérleg részei

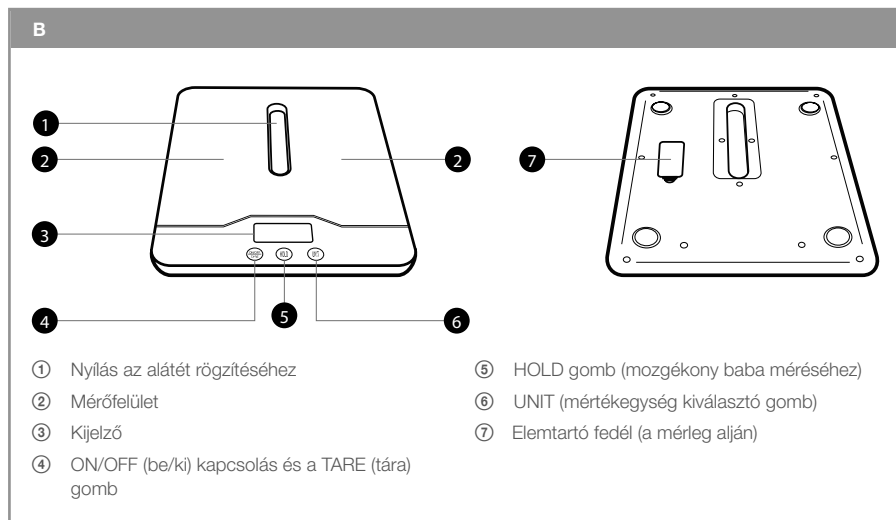

Az elem behelyezése.

- A mérleg tápellátásához két darab 1,5 V-os, AAA típusú (egyszerhasználatos vagy tölthető) ceruzaelemre lesz szüksége. Az elemek nem tartozékai a terméknek.
- Az elemtartó a mérleg alján található. A fedelet **B7** vegye le és tegye be az elemeket. Az elemek behelyezése során ügyeljen a helyes polarításra, amely az elemtartóban van megjelölve. Az elemtartó fedelét szerelje vissza.

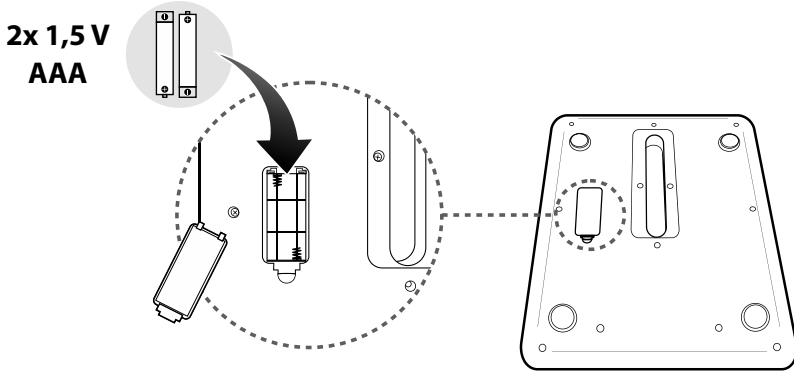

Elem lemerülés kijelzése

- Ha a mérleget nem lehet bekapcsolni, vagy a kijelzőn a „Lo” felirat jelenik meg, akkor az elemek lemerültek, azokat ki kell cserélni.


Az alátét összeállítása és rögzítése

- A mérés előtt az alátétet össze kell állítani, és rögzíteni kell a mérleghez. Az alátét két darabját **A3** és **A4** csatlakoztassa egymáshoz, majd dugja a mérlegen a **B1** nyílásba.
- Az így összeállított mérleget fordítsa fejtetőre, majd azt alátét két rögzítő lemezét fordítsa el úgy, hogy az alátét ne tudjon kicsúszni a **B1** nyílásból. A lemezeket az ujjával, vagy fémpéncz segítségével 90°-kal fordítsa el.



Figyelmeztetés!

Az alátét rögzítését minden használatba vétel előtt ellenőrizze le, nehogy az elmozduló alátét sérülést okozzon a babának.

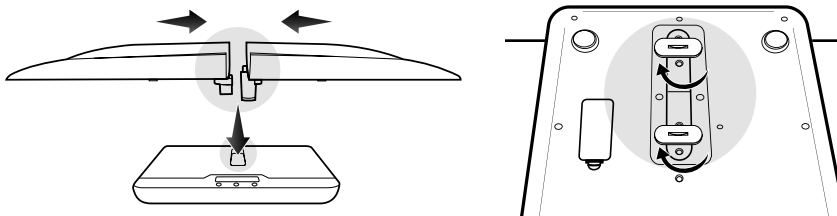

**Tipp**

Amennyiben a mérleget hideg helyen tárolja, akkor a mérés előtt várja meg a mérleg és az alátét szobahőmérsékletre való felmelegedését, különösen akkor, ha a babát ruha nélkül kívánja mérni.

Mérés

Kapcsolja be a mérleget.

- A mérleget szilárd, sima és vízszintes felületre helyezze le. A mérleg bekapcsolásához nyomja meg a **B4** gombot. Néhány másodperc múlva a kijelzőn a „0.00” felirat és a kiválasztott mértékegység jele lesz látható. A mérleg ezzel mérésre kész.

A mértékegység megváltoztatása

- A mértékegység megváltoztatásához nyomogassa a B6 gombot. A kijelzőn egymás után (ciklikusan ismétlődve) a kg, oz és lb mértékegység jelek jelennek meg.

Súlymérés alátéttel

**Tipp**

Amennyiben a súlymérések eredményeit folyamatosan össze kívánja hasonlítani (a baba fejlődésének a kiértékeléséhez), akkor javasoljuk, hogy a mérést mindig azonos időpontban hajtsa végre (pl. reggel). A babát lehetőleg ruha nélkül tegye az alátét közepére. A ruhák, valamint a mérés előtt elfogyasztott étel vagy ital hamis mérést eredményez.

- Amikor a kijelzőn a „0.00 kg” felirat látható, akkor a babát helyezze az alátételre. Legyen nagyon figyelmes, nehogy a baba lecsússzon az alátétről, a baba fejét óvatosan helyezze az alátételre. A babát rövid időre engedje el (ellenkező esetben a mérés nem lesz pontos).

**Figyelmeztetés!**

A babát nem szabad felügyelet nélkül hagyni a mérlegen. A baba megmérése után a babát tegye a kiságyba, vagy babakocsiba.

- Amennyiben a baba nyugodtan fekszik az alátéten, akkor a baba magasságát és meg tudja mérni. Az alátéten 0 – 60 cm-es skála található. A baba talpát óvatosan helyezze a 0 jelre, majd olvassa le a skáláról a baba magasságát.

Súlymérés alátét nélkül

- A nagyobb gyerekeket, akik már önállóan tudnak állni, a mérlegen az alátét nélkül is meg lehet mérni. A gyereket meztláb állítsa a mérőfelületre **B2**, majd olvassa le a kijelzőről a gyerek súlyát. A mérleggel legfeljebb csak 40 kg súlyú gyerekeket lehet mérni



Figyelmeztetés!

Ügyeljen arra, hogy a mérőfelület **B2**, illetve a mérni kívánt gyerek talpa ne legyen vizes vagy nedves. A gyerek megcsúszhat, aminek súlyos sérülés lehet a következménye. Ne engedje, hogy a gyerek a mérlegen ugráljon, mert megcsúszhat vagy leeshet a mérlegről.

Súlymérés a TARE (tára) funkció használatával

- Ha a babát törülközőbe, köntösbe stb. csavarva kívánja megmérni (például fürdés után), akkor a törülközőt vagy köntöst tegye először a mérlegre. A mérleg kijelzőjén a törülköző vagy köntös súlya jelenik meg.
- Nyomja meg a **B4** gombot. A mérleg elmenti a memóriába a törülköző, köntös vagy más ruhadarab súlyát, majd a kijelző lenullázódik. A ruha levétele után a kijelzőn a mért ruhadarab tömege lesz látható („-”mínusz jellel kiegészítve).
- A babát csavarja a ruhadarabba, majd helyezze a mérleg alátétre. A TARE (tára) funkció automatikusan levonja a ruhadarab tömegét, és a kijelzőn a baba súlya lesz látható.

Súlymérés „HOLD” funkcióval

- Amennyiben a baba nyugtalan vagy eleven, akkor a mért érték folyamatosan változik a kijelzőn. Ilyen esetben nyomja meg a **B5** gombot. A HOLD funkció segítségével a kijelzőn leblokkol baba mért súlya.
- A leblokkolt értéket a **B5** gombbal lehet feloldani, vagy a **B4** gombbal lehet lenullázni.

A mérleg kikapcsolása

- Ha a mérlegen 60 másodpercig egy gombot sem nyom meg, illetve nem hajt végre mérést, akkor a mérleg automatikusan kikapcsol. Ha a mérleget kézzel kívánja kikapcsolni, akkor nyomja meg és tartsa benyomva a **B4** gombot. A kijelző kikapcsolása jelzi a mérleg lekapcsolását.

Hibaüzenetek

- A kijelzőn a következő hibaüzenetek jelenhetnek meg:
Lo – alacsony elemfeszültség. Cserélje ki az elemeket.
Err – mérleg túlterhelése. A gyerek súlya 40 kg-nál több.

Tisztítás és karbantartás



Figyelmeztetés!

A tisztításhoz abrazív anyagokat, oldó- vagy hígítószeret tartalmazó tisztítóanyagokat használni tilos. A mérleget vízbe mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos.

- A mérleget mosogatószeres meleg vízbe mártott és jól kicsavart puha ruhával lehet letörölni. A tisztítás után a mérleget törölje szárazra.
- Az alátétet folyó víz alatt, vagy vízben is el lehet mosogatni, illetve mosogatószeres meleg vízbe mártott puha ruhával is le lehet törölni. A tisztítás után az alátétet törölje szárazra.

Tárolás

- A tisztítás után a mérleget tiszta és száraz helyen tárolja. A mérlegre ne tegyen nehéz tárgyakat.
- Ha a mérleget hosszabb ideig nem fogja használni, akkor abból az elemeket vegye ki.

Műszaki adatok

Típuszám	BSB 4050
Tápellátás	2 db 1,5 V-os AAA típusú elem
Maximális terhelhetőség	40 kg
Választható mértékegységek	kg / oz / lb

A lemerült elemek megsemmisítése

Az elemeket a háztartási hulladékok közé kidobni tilos. Az elemeket kijelölt gyűjtőhelyen adja le újrahasznosításhoz.

Használt csomagolóanyagokra vonatkozó előírások


A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

Az eredeti használati útmutató nyelve: cseh.

A készüléken, a csomagoláson vagy a tartozékokon használt jelek jelentése



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.

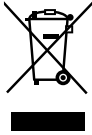

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználódott termék az üzletben is leadható. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

RoHS

Ez a termék megfelel az Európai Parlament és Tanács RoHS direktívájában és az annak módosításaiban megfogalmazott előírásoknak. A RoHS direktíva korlátozza bizonyos veszélyes anyagok használatát az elektromos és az elektronikus készülékekben.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.